

Pflegeanleitung Peroxid-Lösung



1. Hände waschen

Jedes Mal, bevor du deine Kontaktlinsen berührst, wasche gründlich deine Hände mit unparfümierter, antibakterieller Seife und trockne sie mit einem fusselfreien Handtuch gut ab.



2. Kontaktlinsen einlegen

Öffne den Behälter und lege die rechte und linke Kontaktlinse jeweils in die Mitte der entsprechenden Aufnahme. Schließe dann den Körbchendeckel: R = rechts, L = links. Achte darauf, dass du die Platin-katalysatorscheibe nicht mit den Fingern berührst.




3. Behälter füllen

Fülle den Behälter bis zur Markierung mit frischer Peroxidlösung und verschließe ihn anschließend gut.



4. Desinfektion

Lass deine Kontaktlinsen mindestens sechs Stunden – besser über Nacht – in der Lösung. Stelle sicher, dass der Behälter aufrecht steht; schüttle ihn nicht und öffne ihn nicht zu früh, da noch nicht neutralisiertes Wasserstoffperoxid im Verschluss haften könnte.

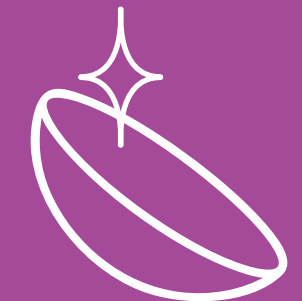

5. Nach der Neutralisation

Nach der Neutralisation kannst du die Linsen direkt aus der Lösung aufsetzen. Schüttele die verbrauchte Lösung weg, spüle den Behälter, die zentrale Halterung und die Katalysatorscheibe mit einer sterilen Kochsalzlösung ab und lass sie mit offenem Deckel an der Luft trocknen.



6. Aufbewahrung

Du kannst deine Kontaktlinsen im geschlossenen Behälter bis zu sieben Tage lang aufbewahren. Danach müssen sie erneut abgespült und desinfiziert werden, bevor du sie wieder einsetzt.

Dein Behälter ist ein kleines Wunderwerk der Technik: Die Katalysatorscheibe beginnt, die Lösung zu neutralisieren, sobald du die Linsen einlegst. Sie spaltet das Peroxid in Wasser und Sauerstoff. Dabei entsteht ein leichter Druck, der über die kleine Öffnung im Deckel entweicht. Berühre die Katalysatorscheibe niemals mit den Fingern! Verwende nur den Original-Behälter mit Katalysatorscheibe, die jeder neuen Flasche beiliegt.